

# 生物安全柜

## SAFETY CABINET

空气经侧面的初效空气过滤器和低噪音离心式通风机压入静压箱，经高效空气过滤器从顶部均匀吹出，形成高洁净度的空气幕，去除工作区域内的原自然空气，开机后五分钟即达到理想的高洁净度空间。采用可调风机双速调节风量大小，轻触型开关调节电压，保证工作区内的风速始终处于理想状态。

### 产品特点

- 箱体壳采用进口中纤板材紧密结合，保证长期无锈蚀发生
- 万向滑轮设计，可根据需要移动工作台放置于合适的位置
- 电器开关用轻触型方便开关，方便使用，灯管用电子镇流器
- 工作台前后配有弹簧式上下移门，定位灵活方便
- 气幕式隔离设计，防止内外交叉污染
- 不锈钢工作台面，更有效保证洁净度

### 产品参数


型号	BHC-1300IIA/B2	BHC-1300IIA/B3
洁净度	100级@≥0.5μm(美联邦209E)	
菌落数	≤0.5个/皿·时(Φ90mm培养皿)	
平均风速	门内侧: 0.38±0.025m/s 门中: 0.26±0.025m/s 门里: 0.27±0.025m/s	
前面吸入风速	0.35m±0.025m/s (A2 70% 外排) 0.55m±0.025m/s (B3 100%外排)	
气密度	≤10 <sup>6</sup> m/s(在500Pa压力下)	
噪音	≤62dB(A)	
振动半峰值	≤5μm	
照度	≥300LX	
电源	AC单相 220V 50Hz	
最大功耗	600W	0.6Kw
重量	220kg	< 350kg
工作区尺寸	1000×700×680	1330×650×580
外型尺寸	1200×780×1950	1530×800×1950
高效过滤器规格及数量	995×640×38×①	1335×600×50×①
荧光/紫外规格及数量	20W×①/20W×①	30W×①/30W×①



控制屏



紫光灯/日光灯

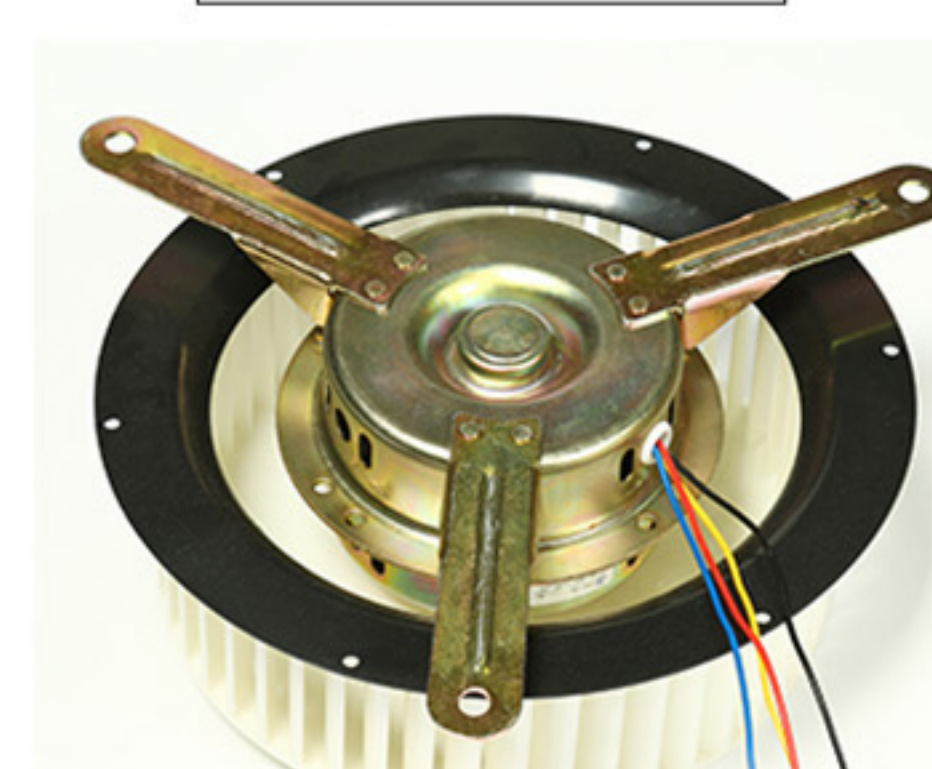

风机



内置插座